


Die Fernbedienung kann wahlweise rechts oder links am Bett angeschlossen werden.

Halten Sie eine Taste gedrückt, um das Bett zu bedienen. Beim Loslassen der Taste stoppt die Bewegung.

Auf der Fernbedienung darf jeweils nur eine Taste betätigt werden. Gleichzeitiges Drücken von zwei Tasten kann zu einer Umprogrammierung führen.

Wenn die Fernbedienung nicht verwendet wird, wird sie vorzugsweise an das Bettgitter gehängt.

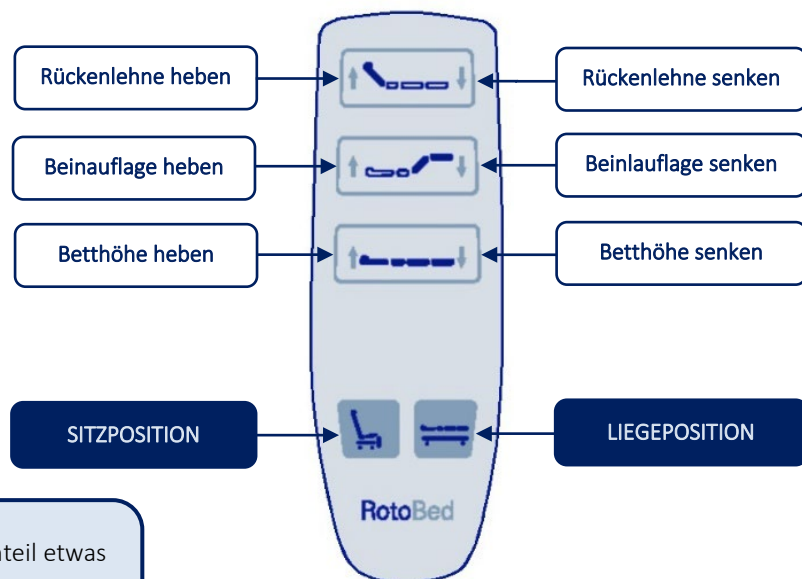

TIPP: Sie können die Fersen entlasten, indem Sie das Beinteil etwas anheben. Dadurch verteilt sich der Druck auf Ihren Unterschenkel und Ihre Fersen heben sich leicht von der Matratze ab.

Einsteigen



Schieben Sie sich so weit wie möglich in den Sitz zurück, um den besten Komfort zu erzielen. Die Standard-Sitzhöhe ohne Matratze beträgt 32 cm über dem Boden. Die optimale Sitzhöhe ist erreicht, wenn die gesamte Fußfläche auf dem Boden aufliegt, ohne das Gewicht Ihrer Beine zu tragen. Verwenden Sie die Betthöhentasten, um die gewünschte Höhe zu bestimmen



Die Höhe wird gespeichert, indem Sie beide Pfeiltasten für die Höhenverstellung gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie einen Piepton hören.

Das Bett bewegt sich dann bei jeder Betätigung der **SITZPOSITION**-Taste automatisch auf die gespeicherte Höhe.

Rückenneigung beim Drehen



Es ist wichtig, dass Sie bequem sitzen, ohne Druck auf die Bauchregion auszuüben, während sich das Bett dreht. Die Standardneigung bei Lieferung beträgt 45°. Die Neigung kann auf einen Winkel von 35° bis 65° eingestellt werden. Außerhalb dieses Bereichs gibt das Bett einen Alarmton von sich. Bewegen Sie die Rückenlehne beim Drehen in die gewünschte Neigung.



Halten Sie beide Pfeiltasten für den hinteren Teil gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Jetzt wird die Rückenlehne in Verbindung mit der Drehung des Bettes immer diese Neigung haben.

Aufsteigen



Halten Sie die Taste **SITZPOSITION** gedrückt, bis das Bett in der Ausstiegsposition stoppt. Um das Aussteigen zu erleichtern, kann die Rückenlehne durch Drücken der Taste „Rückenlehne heben“ das letzte Stück nach vorne gefahren werden. Verwenden Sie dazu die Taste „Betthöhe heben“. So erhalten Sie zusätzliche Unterstützung beim Ausstieg.




Halten Sie für den senkrechten Ausstieg beide **POSITIONSTASTEN** 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Der Ausstiegswinkel ist standardmäßig so eingestellt, um den Übergang in einen Rollstuhl oder Rollator zu erleichtern.

Montage die Bettgittern


RotoBed®Free Pflegebetten können mit Bettgittern aus Metall oder Eichenfurnier geliefert werden. Unabhängig vom Material werden die Bettgitter in der gleichen Weise montiert und entfernt:

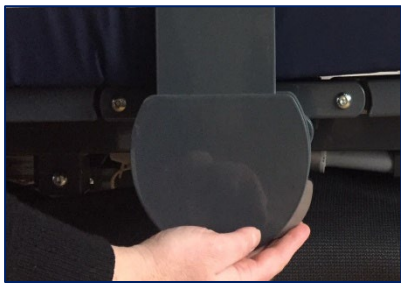

Zum Herausnehmen wird die kleine Taste am Halter des jeweiligen Bettgitters gedrückt, während das Bettgitter in einer schrägen Stellung nach oben herausgezogen wird. Die Bettgitter können einfach wieder eingesetzt werden und verschließen sich automatisch.

Hinweis: Die Bettgitter müssen entweder montiert oder entfernt werden. Lassen Sie sie nicht senkrecht in der Halterung stehen. Dies kann zu Quetschgefahr und Schäden am Bett während der Drehung führen.

Montage der Matratze

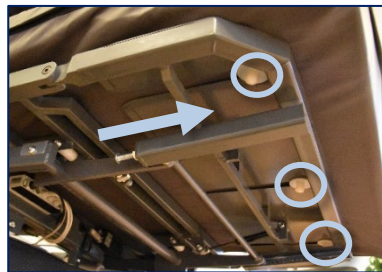


Bewegen Sie das Fußende mit der Fernbedienung in die höchste Position. Falten Sie die Matratze in der Mitte und legen Sie sie so hin, dass die drei Matratzenhalterungen an der Öffnung für die 3 Nuten am Beinteil platziert werden. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Ziehen Sie dann die Matratze in Richtung Fußende, sodass alle drei Matratzenhalterungen auf den Boden der Rillen gleiten. Bewegen Sie die Liegefläche mit der Fernbedienung vollständig in die Waagerechte.

Schieben Sie die Matratzenhalterung in der Mitte der Unterseite der Matratze (auf jeder Seite eine) in das Loch in der Liegefläche. Allenfalls können Sie das harte Klettband zur Seite drehen, sodass es nicht in das weiche Klettband eingreift. Es ist wichtig, dass sich sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite der Metallplatte eine Nylonscheibe befindet. Dies wird durch Drücken auf die Matratze gewährleistet, während die Matratze zur Seite gezogen wird. Ziehen Sie das Klettband zur Bettkante hin heraus, sodass die obere Nylonscheibe fest mit der Liegefläche verbunden ist. Drücken Sie nun die beiden Klettstücke gut zusammen. Wiederholen Sie dann den Vorgang auf der anderen Seite des Bettes. Die beiden Matratzenaufsätze der Fußmatratze werden nach unten in die beiden Rundlöcher in der Liegefläche des Fußteils gedrückt.

Räder und Bremsen

Standardmäßig ist das Bett mit integrierten Tente Linea Doppelrädern ausgestattet. Die Räder sind drehbar. Die Bremsen arbeiten paarweise und können von beiden Seiten des Bettes bedient werden.

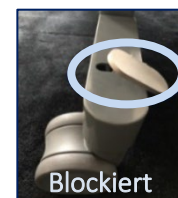

Hinweis: RotoBed®Free sollte nur von Personen verwendet werden, die eine Einführung in die Benutzung des Bettes haben. Das Bett ist nach den neuesten gültigen Normen und Regeln für Pflegebetten geprüft. RotoBed®Free sollte ausschließlich mit der Fernbedienung betrieben werden. Beachten Sie, dass sich keine Kinder oder Tiere unter dem Bett befinden, wenn die Bettteile eingestellt sind. Wenn der Beinteil des Bettes angehoben ist, belasten Sie ihn nicht mit schweren Gegenständen oder Personen. Das Bett muss von den Benutzern innerhalb der folgenden Kriterien verwendet werden: Gewicht 40-190 kg. Höhe ≥ 146 cm. BMI ≥ 17.